



# МИНИ-НАГРЕВАТЕЛИ И МЕШАЛКИ



## **Компактные, надежные и удобные в эксплуатации нагреватели и мешалки**

Прочные мини-мешалки и нагреватели OHAUS позволяют нагревать и перемешивать до 1000 мл жидкости на керамической платформе размером 102 × 102 мм. Такие мешалки идеально подходят для использования в учебных и других лабораториях, где необходимы простой подогрев и перемешивание жидкостей. Все модели имеют встроенный держатель с фиксатором, предназначенный для установки штатива (дополнительная принадлежность). Все модели мешалок комплектуются магнитным якорем длиной 38 мм с покрытием из ПТФЭ.

### **Стандартные функции и возможности:**

- Возможность выбора необходимой функции для повседневных задач подогрева и перемешивания. Пять моделей на выбор — нагреватель, нагреватель с фиксированной температурой, мешалка, автоматическая мешалка и мешалка с подогревом.
- Мини-нагреватели OHAUS просты в очистке. Все модели оснащены химически стойкой гладкой керамической платформой. Ее отражающая белая поверхность обеспечивает оптимальный обзор образцов.
- Безопасная конструкция — корпус изготовлен из уникального термостабильного и химически стойкого материала, холодного на ощупь. Конструкция с защитой от разбрызгивания гарантирует длительную и надежную эксплуатацию.

# МИНИ-НАГРЕВАТЕЛИ И МЕШАЛКИ

№ модели	HSMNHP4CAL	HSMNHP4CFT	HSMNST4CAL	HSMNAS4CAL	HSMNHS4CAL
Функция	Нагрев		Перемешивание	Перемешивание, автоматический пуск/останов	Нагрев и перемешивание
Диапазон скорости	—		100–1200 об/мин		
Диапазон температур	До 500 °С	500 °С	—	—	До 500 °С
Максимальная нагрузка	1000 мл				
Размеры платформы (Д × Ш):	10,2 × 10,2 см				
Тип управления	Аналоговый				
Материал платформы	Керамика				
Размеры (Ш × Г × В)	12,7 × 20,1 × 15,2 см				
Масса без упаковки	1,8 кг				
Питание	230 В, 0,9 А, 50/60 Гц		230 В, 0,25 А, 50/60 Гц		230 В, 1,25 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	200 Вт		20 Вт		100 Вт
Рабочие условия	От +5 до +40 °С, относительная влажность от 20 до 85 %, без конденсации				

## Прочие стандартные функции и возможности

Корпус из материала Valox, регуляторы основных функций, магнитный якорь 3,8 см (входит в комплект мешалки), переключатель «Вкл./выкл.» (для моделей с фиксированной температурой).


## Соответствие стандартам

- **Безопасность:** EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051.
- **Электромагнитная совместимость:** EN 61326-1, класс А, промышленная среда.
- **Знаки соответствия:** CE; RCM; TÜV SÜD.

## Принадлежности

Номер по каталогу	Описание	HSMNHP4CAL	HSMNHP4CFT	HSMNST4CAL	HSMNAS4CAL	HSMNHS4CAL
30400145	Гибкие опорные системы Ultra Flex	•	•	•	•	•
30400146	Опорная штанга и зажим в сборе	•	•	•	•	•
30400147	Якорь Spinbar® 2,5 см; ПТФЭ			•	•	•
30400148	Якорь Spinbar® 3,8 см; ПТФЭ			•	•	•
30400149	Якорь Spinbar® 7 см; ПТФЭ			•	•	•
30400150	Якорь Spinbar® 10 см с шарнирным кольцом, ПТФЭ			•	•	•

## Размеры

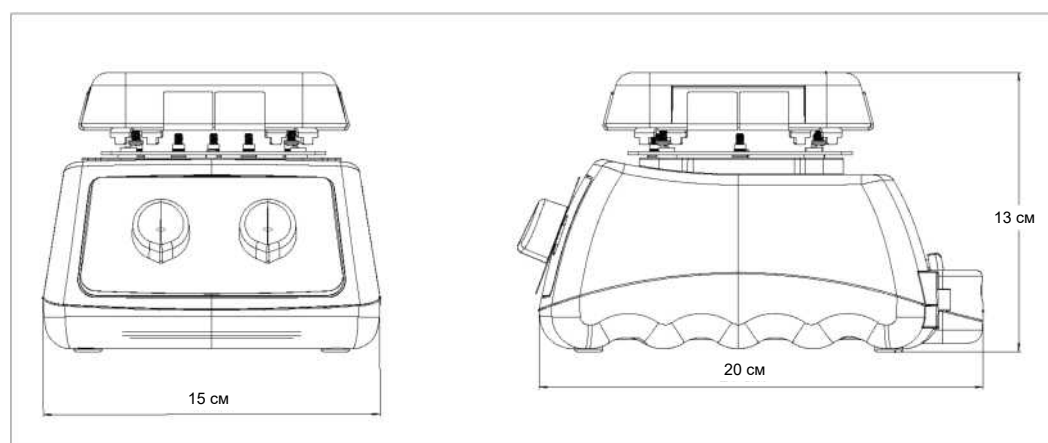

**ОХАУС СНГ**  
 Москва, 101000,  
 Сретенский бульвар, 6/1, офис 6,  
 Тел.: +7 (495) 621-48-97  
 Продажи: ru.sales@ohaus.com  
 Сервис: ru.service@ohaus.com  
 Маркетинг: ru.marketing@ohaus.com  
 www.ohaus.com  
 Представительство в странах СНГ  
 ISO 9001:2015  
 Зарегистрированная система  
 управления качеством

80775761\_20190816 © Copyright OHAUS Corporation

