



Вихревые смесители для микропланшетов



Идеальное решение для надежного вихревого перемешивания образцов в микропланшетах

Вихревые смесители OHAUS для микропланшетов идеально подходят для перемешивания в микропланшетах во всем диапазоне скоростей. Все модели предназначены для работы в непрерывном режиме в лабораторных условиях. Цифровые модели с таймером позволяют точно контролировать скорость перемешивания для получения воспроизводимых результатов, а аналоговые модели с регулируемой скоростью более выгодны с экономической точки зрения. Благодаря высокой скорости и малой амплитуде эти приборы оптимально подходят для обработки микропланшетов.

Стандартные функции и возможности:

- Безопасное перемешивание при высоких скоростях — инновационная система крепления принадлежностей для микропланшетов обеспечивает безопасную работу во всем диапазоне скоростей.
- В этих смесителях используется высококачественный немецкий электродвигатель, обеспечивающий надежную, бесперебойную работу на любой скорости.
- Прочные цифровые и аналоговые смесители позволяют задать скорость, необходимую для мягкого встряхивания или интенсивного перемешивания образцов.

Вихревые смесители для микропланшетов

Модель	VXMPAL	VXMPDG
Тип управления	Аналоговый	Цифровой
Диапазон скорости	Непрерывный режим: от 300 до 2500 об/мин Режим «при нажатии»: от 300 до 3500 об/мин	
Амплитуда	3,5 мм	
Режим работы	Непрерывный	
Максимальная нагрузка	Два микропланшета	
Рабочие условия	От 4 до 40 °С при относительной влажности от 20 до 85 %, без конденсации	
Питание	230 В, 0,13 А, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	30 Вт	
Размеры (Ш × Г × В)	137 × 266 × 114 мм	
Масса без упаковки	5,3 кг	

Прочие стандартные функции и возможности

Съемный 3-проводной кабель и вилка (в комплекте), адаптер для одинарного микропланшета и платформа с выемкой (в комплекте).

Соответствие стандартам

- **Безопасность:** EN 61010-1, EN 61010-2-051.
- **Электромагнитная совместимость:** EN 61326-1, класс А, промышленная среда.
- **Знаки соответствия:** CE; RCM; TÜV SÜD.


Принадлежности

Платформа с выемкой, вихревые смесители VXHD и VXMP 30400210

Держатель для двойного микропланшета 30400213

Держатель для одинарного микропланшета 30400215

Размеры

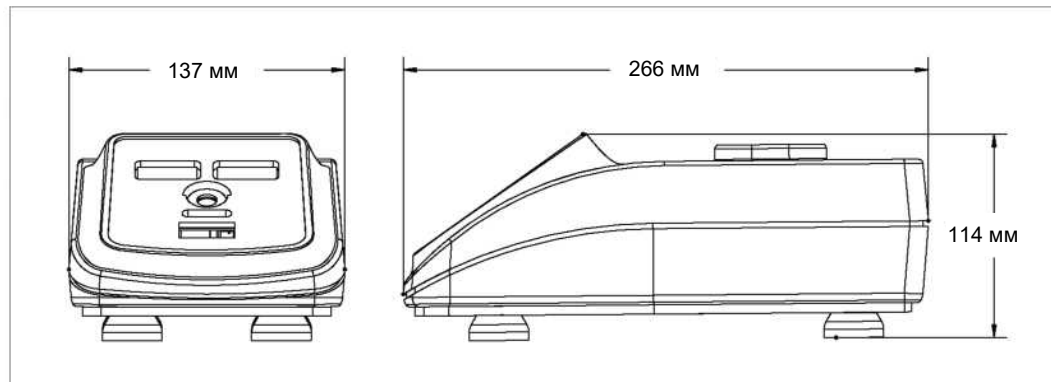

80775585 20190816 © Copyright OHAUS Corporation

ОХАУС СНГ
 Москва, 101000,
 Сретенский бульвар, 6/1, офис 6,
 Тел.: +7 (495) 621-48-97
 Продажи: ru.sales@ohaus.com
 Сервис: ru.service@ohaus.com
 Маркетинг: ru.marketing@ohaus.com
 www.ohaus.com
 Представительство в странах СНГ
 ISO 9001:2015
 Зарегистрированная система
 управления качеством

