



SF40A

Матричный принтер



Качество OHAUS, воплощенное в полнофункциональном портативном принтере

В новейшем портативном матричном принтере SF40A сочетаются высокая производительность и обширный набор функций, а также высокое качество и долговечность, свойственные всем продуктам OHAUS. SF40A — это исключительно высококачественный, простой в настройке и удобный в работе принтер с расширенным набором функций. Этот универсальный принтер обеспечивает точное документирование результатов взвешивания и идеально подходит для работы с весами OHAUS в лабораториях, на производстве и в образовательных учреждениях.

Стандартные функции и возможности:

- **Разнообразные режимы работы и функции для поддержки процесса регистрации данных:** дополнительные режимы сбора статистики и суммирования результатов расширяют функциональные возможности принтера SF40A в ходе взвешивания и регистрации данных. Системные часы принтера SF40A позволяют регистрировать дату и время вывода данных на печать. Питание системных часов от встроенной батареи обеспечивает точность отметок даты и времени.
- **Простота настройки и конфигурации исключает потери времени:** принтер не должен тормозить весь процесс взвешивания. Весы OHAUS обеспечивают повышение выработки и производительности труда. Принтер SF40A дает те же преимущества и позволяет выполнять поставленные задачи с максимально возможной эффективностью. С помощью программы настройки для ПК можно быстро и без труда подключить принтер к весам, настроить параметры передачи данных, установить текущую дату и время. Интерфейс RS232 и вывод данных в соответствии с нормами GLP/GMP позволяют обеспечить прослеживаемость и соблюдение нормативных требований.
- **Поддержка нескольких языков для повсеместного использования:** SF40A поддерживает 13 различных языков и позволяет печатать данные на том языке, который выбран на подключенном устройстве.

Матричный принтер SF40A

Модель	SF40A
Число столбцов	40
Скорость печати	Приблизительно 1,2 строки в секунду
Режимы работы	Суммирование, статистика (печатаемые статистические данные включают количество взвешенных образцов, среднее значение массы, стандартное отклонение, минимальное и максимальное значения, разность макс.-мин. и сумму масс образцов)
Размеры бумажного рулона (Ш x Диам.)	Стандартный бумажный рулон 57,5 x Ø60 мм макс.
Требования к электропитанию	Входное напряжение блока питания: 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц Выходное напряжение сетевого адаптера: 12 В пост. тока, 2,5 А
Интерфейс	RS232C
Температура окружающего воздуха	0–40 °C
Размеры принтера (Ш x Д x В)	140 x 205 x 75 мм
Масса принтера	740 г (с бумажным рулоном)
Масса в упаковке	0,8 кг

Прочие стандартные функции


Индикатор состояния, ширина строки 40 символов, установка нуля и тарирование весов нажатием кнопки на принтере. Полная поддержка функций принтера при использовании с весами Adventurer™, Explorer®, Navigator®, анализаторами влажности серии MB и терминалами серии T. При использовании с настольными весами SKW и весами серии Scout® функции статистики и суммирования не поддерживаются.

Поддерживаемые языки: английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский, португальский, русский, французский, чешский, японский.

Принадлежности

Бумага (в комплекте)	12120799
Втулка бумажного рулона (в комплекте)	30063920
Красящая лента (в комплекте)	12120798
Кабель для подключения принтера к весам Discovery, Explorer™, Adventurer™, Pioneer™, анализаторам влажности MB 90/95/120, MB 23/25, весовым терминалам Ranger™, Ranger™ Count, терминалам серии T для сухих условий (в комплекте)	12122603
Кабельный переходник (в комплекте)	30059316
Переходник для подключения принтера к весам Voyager® Pro, Explorer® Pro (не входит в комплект)	30064209
Кабель для подключения принтера к весам SKW и терминалам серии T (не входит в комплект)	80500552
Кабель электропитания с вилкой для Австралии, SF40A (не входит в комплект)	12120313
Кабельный переходник	30059316

Габаритные размеры

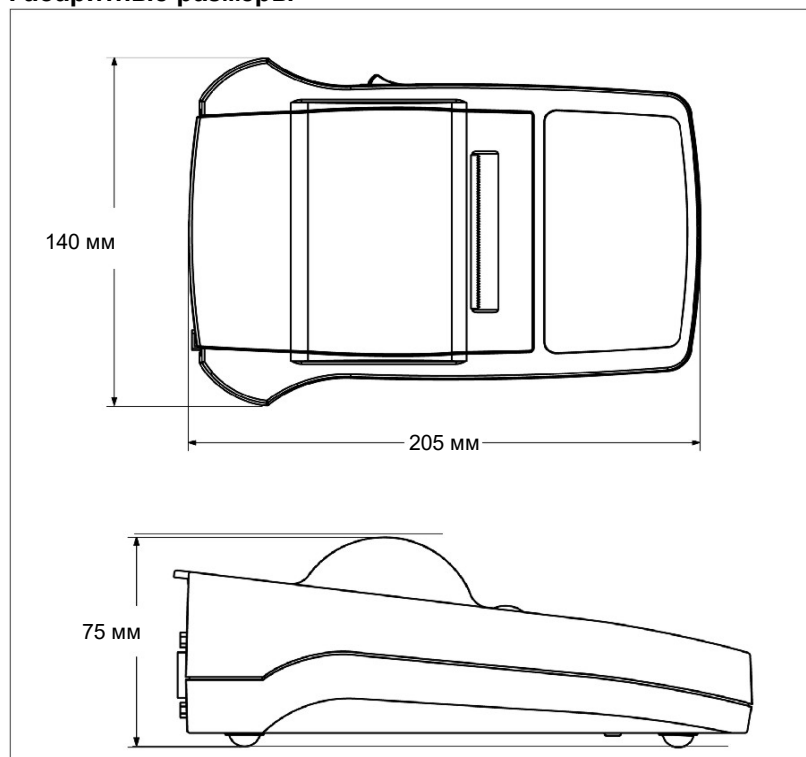

OHAUS СНГ

101000, Москва,
Сретенский бульвар, 6/1, офис 6

Продажи: ru.sales@ohaus.com
Сервис: ru.service@ohaus.com
Маркетинг: ru.marketing@ohaus.com

www.ohaus.com

Система управления
производством продукции
сертифицирована в
соответствии с требованиями
стандарта ISO 9001:2015.

